


取扱説明書

設置する前、ご使用前に必ずお読みになり、
正しくお取り扱い下さい。

MILD MIXER PR-36

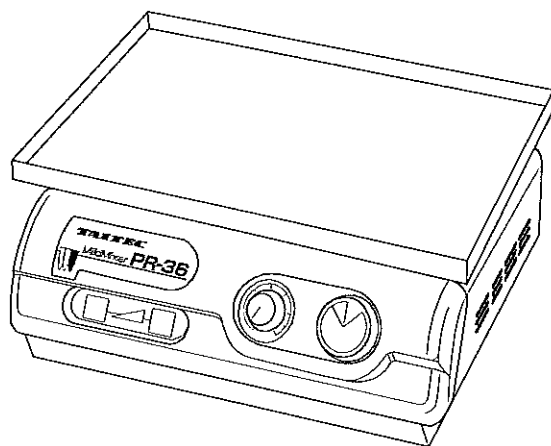

いつでも使用できるように大切に保管して下さい。

タイテック株式会社

はじめに

- この度は タイテック 製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。本機の機能を十分に活用して頂く為に、本書をよく読んで正しくお取り扱い下さい。
- また、本取扱説明書は当製品が破棄処分されるまで、そして保証書発行申請によりご返送する保証書についても、大切に保管して下さい。
本取扱説明書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点などがありましたら、最寄りのタイテックサービスセンターにご連絡下さい。
- 取扱説明書に基づかない不適当な取扱いや使用は、本機の性能を損なったり、事故や故障の原因になりますので、絶対にお止め下さい。
- 本書が汚れて読みにくくなったら、最寄りの当社サービスセンターに、当「取扱説明書管理番号」をご連絡の上、ご請求下さい。

保証登録システムについて

大変お手数ですが、取扱説明書と同梱してある「保証書発行申請書」に、所定の事項をご記入の上投函して下さいますようお願い致します。

納入後1年間の保証登録をコンピューターに入力後、直ちに保証書を発行し、お送り致します。お客様のご意見をできる限り開発に反映し、使い勝手の良い製品作りに努めます。また、当社の総合カタログ、新製品ニュース、展示会等の情報をサービスとして実地致します。

はじめに	1
保証登録システムについて	1
目次	2
安全にお使い頂くために	3
本機の概要	4
1. 各部の名称	4
2. 仕様	4
運転の準備	5
1. 開梱	5
2. 設置	5
3. 電源の接続	5
操作部の機能	6
運転操作	6
日常の点検・手入れ	7
長期間ご使用にならない時	7
廃棄について	8
故障診断	8

安全にお使い頂くために


次のような使い方にご注意下さい。

◇ 設置場所

本体は水平な床に設置して下さい。床が平坦でなかったり、水・油で濡れていたりすると、運転中に移動することがありますので、注意して下さい。



水・油で濡れている床、平坦でない床では使用しないこと

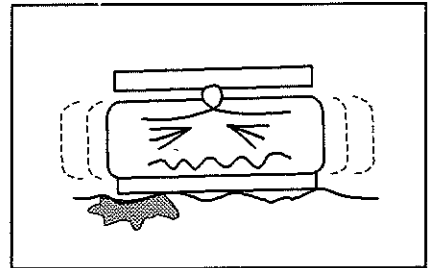


◇ 指挟み注意

①運転中において振とう台と本体の隙間に手、指等挟まないように注意して下さい。



運転中は手、指等を振とう台に近づけないこと

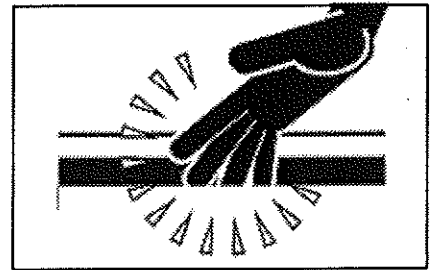

②点検等においては運転が停止してから行って下さい。




必ず運転の停止後、作業のこと


- ・使用電源は各機種の仕様を確認し、必ず所定の電源範囲でご使用下さい。
- ・本機は、冷暖房機器の吹き出し口の近く、直射日光のあたる場所、振動や衝撃の大きい場所、冠水や被油がある場所、高温多湿、溶剤等の影響がある場所、高い周波数ノイズの発生機器の近く等への設置は避けて下さい。
- ・また、本機を移動する場合は、必ず電源プラグを抜いて、熱媒体や試験試料を除去してから、衝撃を与えないよう静かに行って下さい。

本機の概要

1. 各部の名称

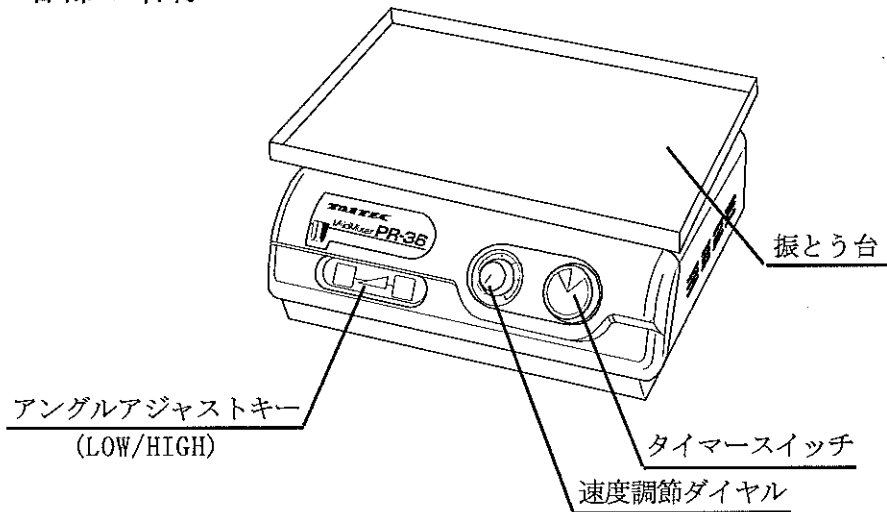

【本体背面】

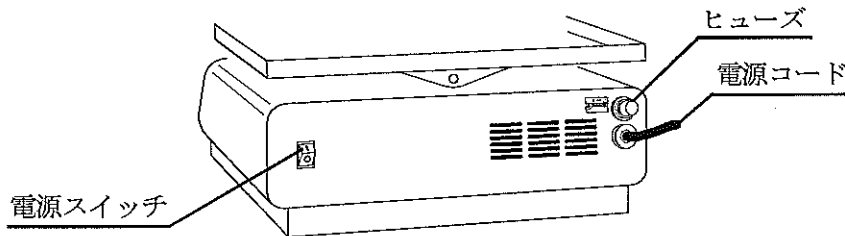

2. 仕様

攪拌モーター	DCモーター
攪拌方式	波動形揺動
振とう速度	20～120r/min
振とう台傾斜角	水平より約2°～6°（無断可変）
タイマー	運転用60分タイマー
許容負荷重量（*1）	1kg
振とう台寸法	310×210mm
本体外形寸法	310×250×140Hmm（*2）
本体重量	約5.5kg
使用周囲温度	+5℃～+45℃
電源	AC100V 0.5A
標準付属品	すべり止めシート : 1 ガラス管ヒューズ（2A） : 1

（*1） ラック、シャーレ、バット等の重量も含みます。

（*2） 振とう台寸法を含みます。

運転の準備

1. 開梱

・梱包を解いた後、付属品を確かめて下さい。

付属品 ●ヒューズ2A : 1	付属書類 ●取扱説明書 ●保証書発行申請書 ●検査合格書
-----------------	------------------------------------


2. 設置

設置場所については、次の条件をお守り下さい。

- ①水平な床の上。
- ②熱気、湿気を受けない通気性の良いところ。
- ③直射日光の当たらないところ。



水・油で濡れている床、平坦でない床では使用しないこと

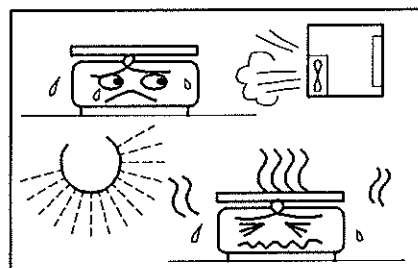

4. 電源の接続


- ①電源スイッチをOFFにして下さい。(本体後面)
 - ②タイマースイッチをOFFにして下さい。
 - ③電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
- ※2Pコンセントの場合は、2Pコンセント用アダプター等を用いてコンセントに接続して下さい。




プラグの差し抜きはプラグ本体を持って行うこと



危険防止のためアースは必ず接続のこと

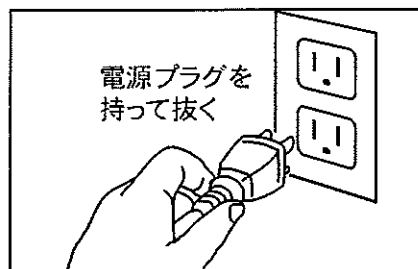

操作部の機能

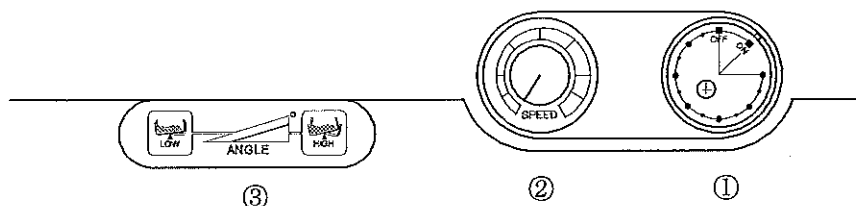

①タイマースイッチ

「ON」…………… 連続運転

「OFF」……………運転停止：(電源OFF)

「OFF-60」……… タイマー運転

※但し、10min以下の設定の場合、一旦「10」以上回し、戻しながら合わせて下さい。

②速度調整ダイヤル

左に回すと回転が遅くなり、右に回すと速くなります。

③アングルアジャスターキー (E. A. S)

LOWキーを押すと振とう傾斜角が浅くなります。

HIGHキーを押すと振とう傾斜角が深くなります。

運転操作

①電源スイッチを「ON」にして下さい。

②タイマースwitchを「ON」にして下さい。

タイマー運転の場合はご希望の時間に合わせて下さい。

③アングルアジャスターキーにてLOW/HIGH傾斜角の調整を行い、速度調整ダイヤルにてご希望の速度に調整して下さい。

注意




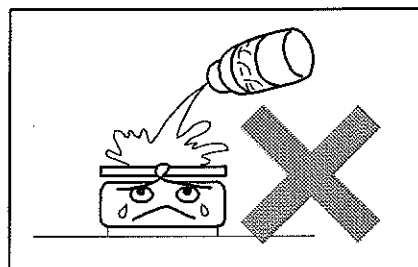
運転中の容器の着脱や、ラックの着脱は危険ですので絶対におやめ下さい。

日常の点検・手入れ

◇本体の手入れ

やわらかい布で空拭きして下さい。汚れの落ちにくい時は、中性洗剤に浸した布で拭き取った後、空拭きして下さい。


注意 	有機溶剤（シンナー、ベンゼン）での拭き取りはしないこと
--	-----------------------------



長期間ご使用にならない時



◇本体

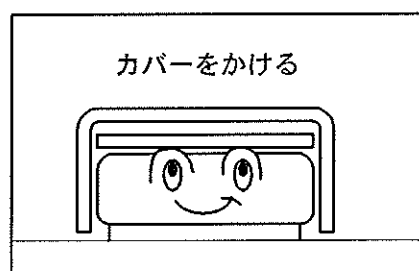
電源コードをコンセントから抜き、各部の汚れを取り除いた後、埃や異物が入らない様にカバーをかけ、湿気の少ない所へ保管して下さい。



◇電源コード

電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って下さい。コードを引っ張ると、断線の原因となります。


注意 	プラグの差し抜きはプラグ本体を持って行うこと
注意 	電源コードは極端な折り曲げ、重いものをのせないこと

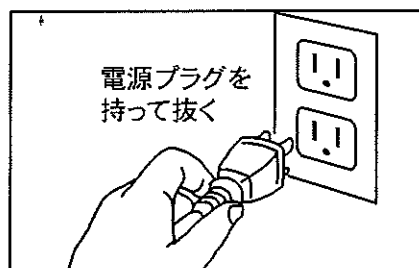

廃棄について


本製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切な処理を行って下さい。

故障診断

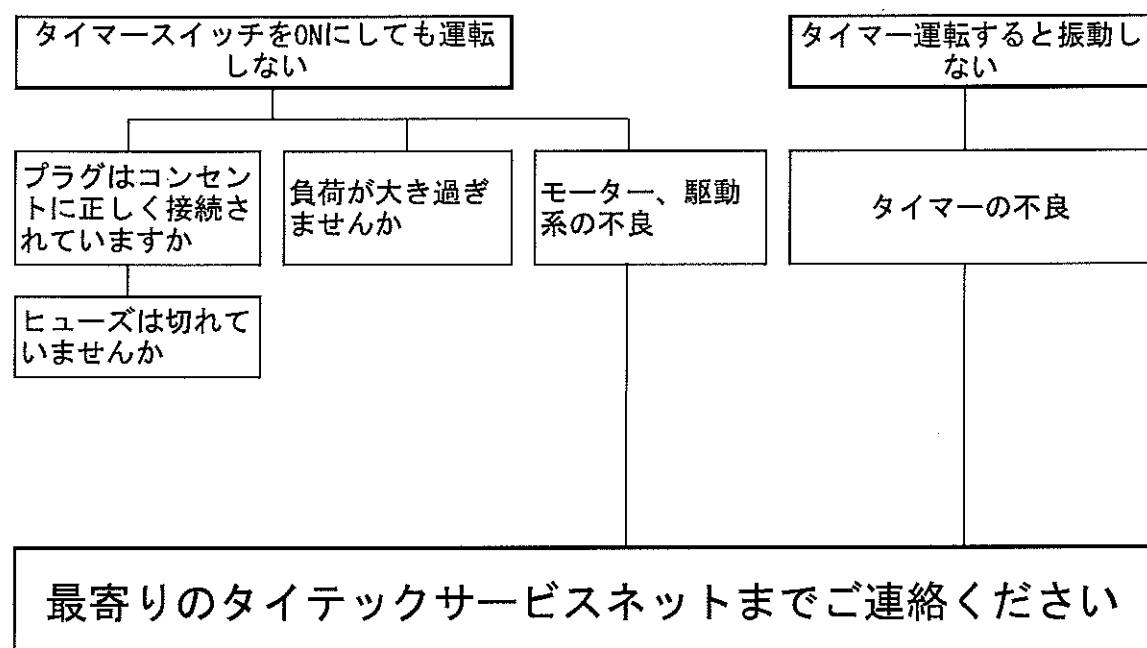

タイテックサービスネット

ユーザー所在地に基づいてのテリトリーで活動してます。
ご連絡は、担当 TSC.へお気軽にどうぞ。

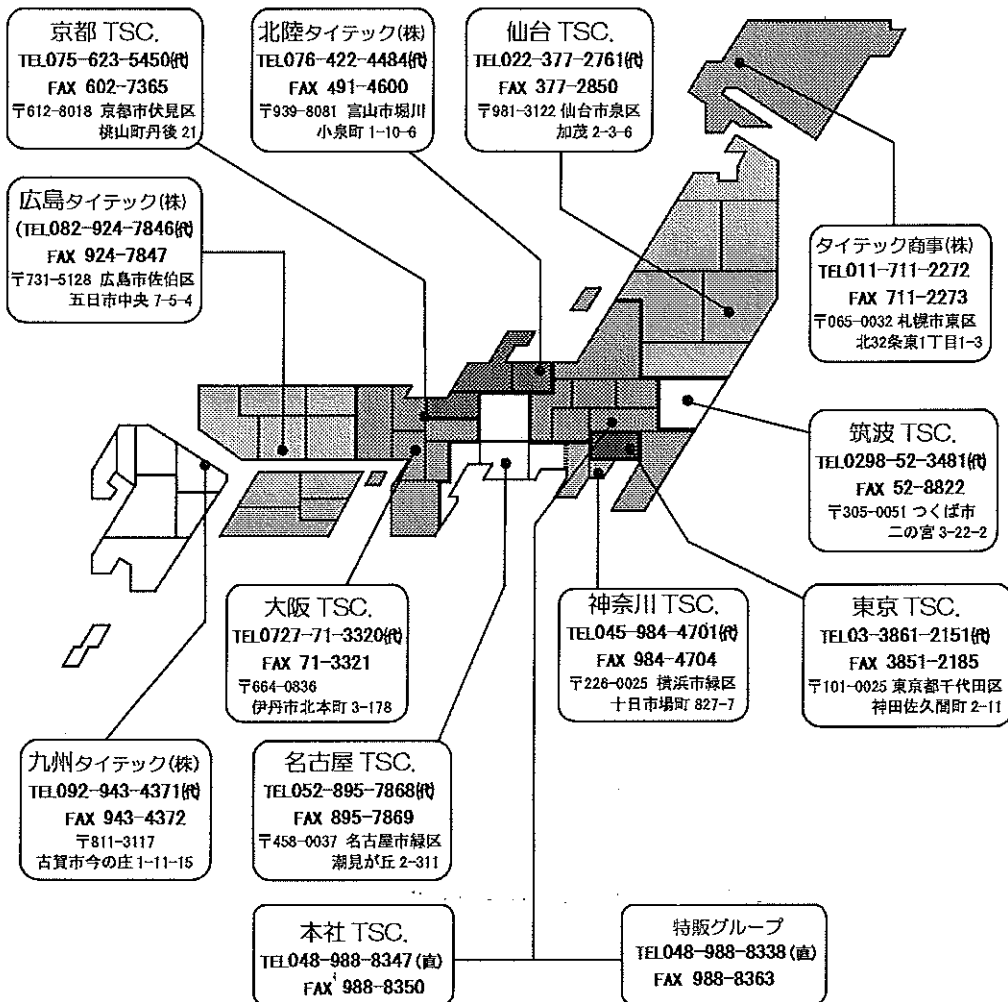

本社/〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2693-1

購入年月日	年 月 日
購入先名	
担当者名	
電話番号	
FAX番号	
その他	
タイテック取説管理番号	0307E

タイテック株式会社